


BeneHeart R12

přístroj EKG



Systém BeneHeart R12 poskytuje rychlou a přesnou diagnostiku EKG, která umožní splňovat nejrůznější klinické požadavky.

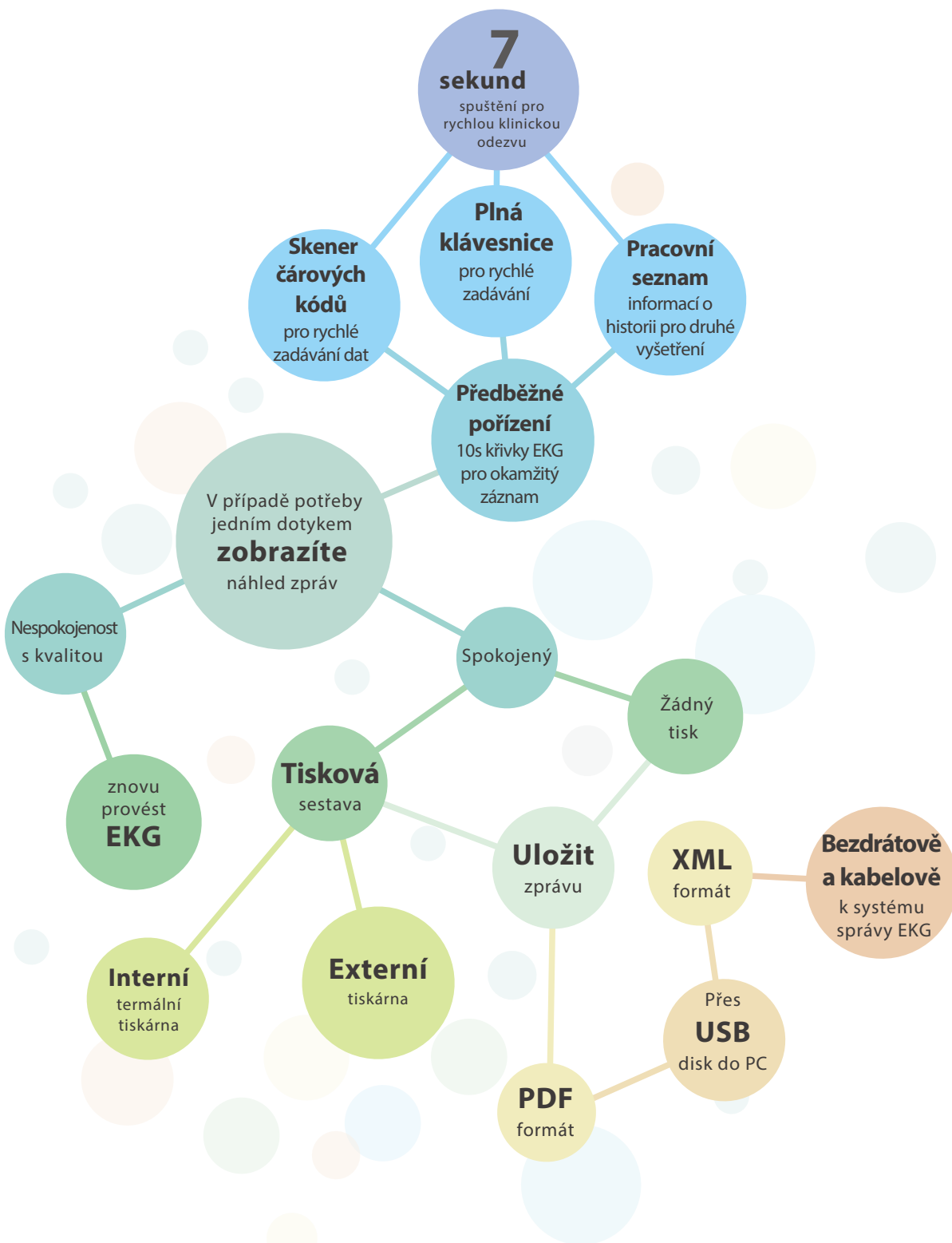



Prostředí a modernizace

Proces bez potřeby papíru umožňuje rychlejší testování pacientů a snižuje nutnost používání drahého EKG papíru

- Úplný náhled tisku pomáhá při rozhodování, zda je nutné okamžité opakování záznamu EKG, takže je pracovní postup rychlejší než dříve.
- Zobrazení náhledu pro okamžité prohlížení na obrazovce umožňuje odesílat data do systému kontroly EKG bez tisku.
- Náhled na obrazovce umožňuje kdykoli obnovit předchozí zprávy EKG.





Kvalita a výkon

Snadno použitelná technologie šetří váš čas



- Osmipalcový barevný displej s vysokým rozlišením
- Volitelně dotyková obrazovka



- Uživatelsky orientovaná tlačítka pracovních postupů
- Moderně navržené klávesy s měkkým stiskem
- Standardní rozložení kláves



Demografické údaje pacientů lze vyvolat z pracovního listu



Anatomicky konstruovaný kabel minimalizuje zamotání a obrácení svodů



Volitelná čtečka čárového kódu pro rychlý vstup přesných demografických údajů pacienta

Inteligentní design pro zaneprázdněné odborníky



- Stabilní, čisté a přesné křivky EKG zajišťují kvalitu údajů EKG a pomáhají rychlejšímu zpracování
- Jasný přehled výsledků umožňuje zaměřit se na diagnostiku a péči
- Úložiště až pro 800 interních záznamů EKG, nebo je možné použít jednotku USB disk pro uložení a přenos EKG off-line
- Lithium iontová baterie umožní napájení déle než 3,5 hodiny souvislého provozu nebo 400 stránkový záznam na jedno nabití.
- Jeden z nejlehčích dostupných 12svodových elektrokardiografů - pouhých 4,8 kg
- Volitelný robustní a kompaktní vozík pro snadnou mobilitu a uložení



Měření a diagnóza

Globálně uznávaná 12svodová analýza Glasgow podporuje spolehlivost diagnostiky

Přesná diagnóza pro dospělé i děti již od narození. Více než 40letý soustavný vývoj algoritmu Glasgow zaručuje jednu z nejlepších analýz EKG na světě

ID:	2012050454367890
Name:	Doc. John
DOB:	1940-05-01 72years
Gender:	Male
Race:	Caucasian
Medication 1:	No Medication
Medication 2:	No Medication

Věk, pohlaví a etnikum udávají kritéria pro zlepšení přesnosti u jednotlivých pacientů.



Automatizovaná diagnostika používající elektrody V,R(C,R), jejichž umístění je ideální pro pediatrické pacienty

*** CONSIDER ACUTE STEMI ***	
Time:	2012-02-04 20:49:10
ECG:	12-lead ECG
Interpretation:	Abnormal ECG
Unconfirmed Diagnosis:	

Zdůrazněná upozornění na šest kritických hodnot pomáhají rychlé odezvě při potenciálně urgentních potížích.

II. Automatizovaná analýza po úpravě demografických údajů pacienta pomáhá urychlit zachycení EKG bez volby pozdějšího přidání údajů o pacientovi



s nedostatečnými demografickými údaji

po aktualizaci demografických dat (přidán věk, pohlaví)

Digitální detekce kardiostimulátoru poskytuje spolehlivé hlášení síňového, komorového a A-V sekvenčního stimulačního režimu bez volby citlivosti detekce kardiostimulátoru.

Přehled významných příhod arytmií přidáním dalšího 1minutového výtisku po automatické operaci EKG





Periferní zařízení a komunikace



Inovace se u modelu R12 zaměřují na zlepšování kvality zdravotnické péče, zvyšování provozní účinnosti a snižování uživatelských nákladů díky dostupným a kompaktním řešením



Cheirón®
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Provozovna Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 797
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941

www.cheiron.eu



ISO 13485